



## Una solución de ajuste

FitLife ofrece comodidad a aquellos pacientes a los que cuesta colocarles la mascarilla.

La mascarilla para toda la cara FitLife es una solución para los pacientes que tienen problemas para usar las mascarillas convencionales o que simplemente prefieren una línea clara de visión.

El vello facial, las dentaduras postizas, las molestias en el puente nasal, las irregularidades faciales y la claustrofobia son factores que pueden afectar en gran medida a la capacidad para ofrecer comodidad y una terapia efectiva. FitLife ofrece una solución para los hombres y las mujeres que se enfrentan a estas situaciones. La mascarilla establece, de forma rápida, un sellado firme alrededor del perímetro de la cara menos sensible a la presión, al tiempo que ofrece una visión sin restricciones. Los clips a presión fáciles de usar y el arnés de última tecnología permiten colocar y retirar la mascarilla de forma sencilla. El tamaño grande de esta "mascarilla de solución total" se ajusta a la mayoría de los pacientes. La nueva FitLife es la última novedad para ayudarle a ajustar las mascarillas de todos sus pacientes en todo momento.

**PHILIPS**

RESPIRONICS

El arnés FitLife está disponible en tamaño pequeño y grande.

Las lengüetas de EZ Peel permiten ajustar y retirar el arnés de forma rápida y sencilla.

Los clips a presión hacen que sea más fácil volver a colocar la mascarilla y eliminan la necesidad de reajuste después de retirarla.

Con la almohadilla moldeada integrada en el marco de la mascarilla se reduce el número de piezas.

El sello del perímetro con la suave almohadilla de silicona se ajusta de forma rápida y uniforme para aportar la máxima comodidad.



El conector giratorio accesorio permite un mayor movimiento de los tubos.




La amplia área de superficie iguala la presión y el flujo dentro de la mascarilla, lo cual reduce la irritación de los ojos.

La válvula inspiratoria permite el acceso al aire del ambiente si la temperatura desciende por debajo de los 3 cm de H<sub>2</sub>O.

Los orificios de fuga integrados de difusión radial envían el aire exhalado lejos del compañero de cama y ofrecen un funcionamiento silencioso.

El acceso para línea de toma de presión permite medir la presión o enriquecer con oxígeno.

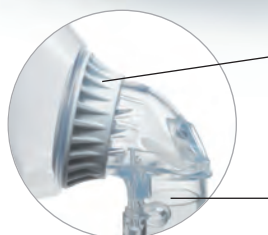

Artículo	Número de referencia
<b>Mascarilla FitLife</b>	
Mascarilla pequeña con arnés pequeño	1060803
Mascarilla grande con arnés grande	1060804
Mascarilla pequeña con arnés pequeño, sin orificio de exhalación	1061711
Mascarilla grande con arnés grande, sin orificio de exhalación	1061712
<b>Piezas y accesorios</b>	
Arnés FitLife, pequeño	1060807
Arnés FitLife, grande	1060808
Clips a presión para arnés FitLife (2 por paquete)	1060913
Codo de exhalación FitLife	1060809
Codo SE FitLife	1060810
Conector giratorio accesorio	7041

Respironics, FitLife y EZ Peel son marcas registradas de Respironics, Inc. y empresas afiliadas.



© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. Todos los derechos reservados. Philips Healthcare se reserva el derecho de modificar las especificaciones y/o de suspender la fabricación de un producto en cualquier momento sin notificación previa y sin que de ello deriven obligaciones; tampoco será responsable de las consecuencias que deriven del uso de la presente publicación. PRECAUCIÓN: la ley federal de EE. UU. limita la venta de estos dispositivos a médicos o bajo prescripción facultativa.

Broudy KB 7/13/09 MCI 4102443 PN 1063923

Philips Healthcare forma parte de Royal Philips Electronics

Respironics Asia Pacífico  
+65 6298 1088

Respironics Europa, Oriente Medio, África  
+33 1 47 52 30 00

Philips Respironics  
1010 Murry Ridge Lane  
Murrysville, PA 15668

Atención al cliente  
+1 724 387 4000  
800 345 6443 (toll free, US only)  
www.philips.com/respironics